


# Gebruuchsinformation Blaseninstillationssystem


## AdriaCept® Lösung 50 mg Blasen-Instillations-Set Injektionslösung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Sie enthält wichtige Informationen, wie Sie das Blaseninstillationssystem in Kombination mit AdriaCept® Lösung 50 mg anwenden sollen. Bitte beachten Sie außerdem die Gebrauchsanweisung des Arzneimittels AdriaCept® Lösung 50 mg Blasen-Instillations-Set Injektionslösung.


### Set-Inhalt:

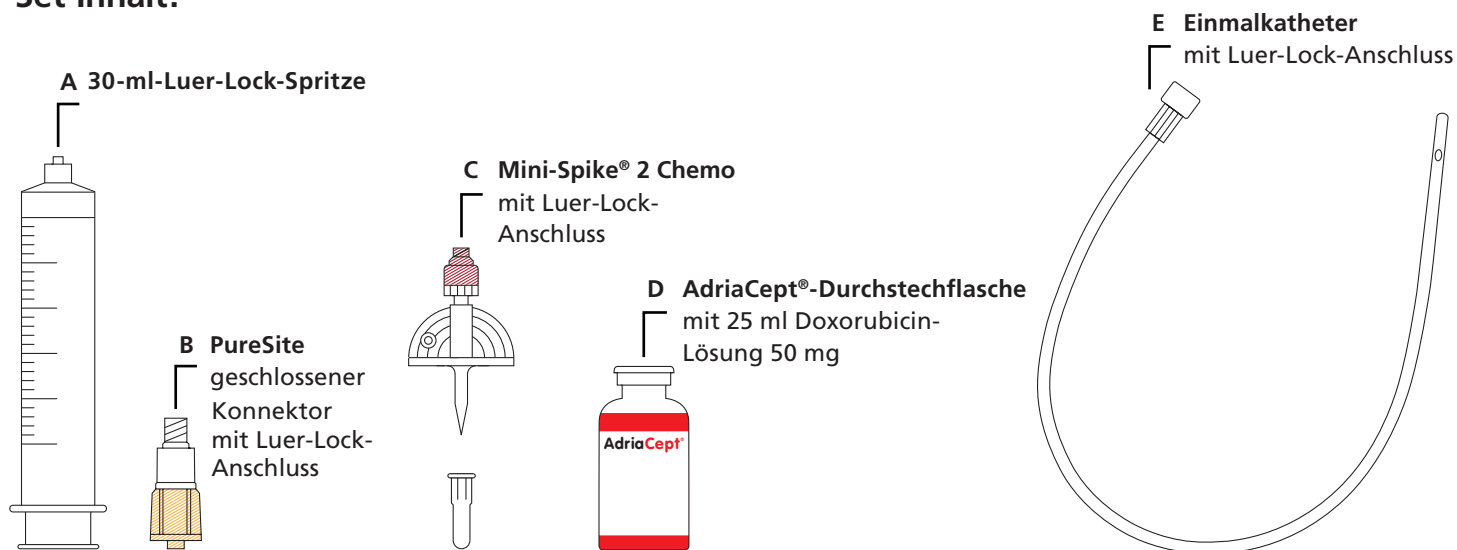

Zur sicheren und sterilen Verabreichung sind der **PureSite-Konnektor (B)** und der **Mini-Spike® 2 Chemo (C)** zu verwenden, um **25 ml AdriaCept® Lösung 50 mg (D)** in die Spritze aufzuziehen.

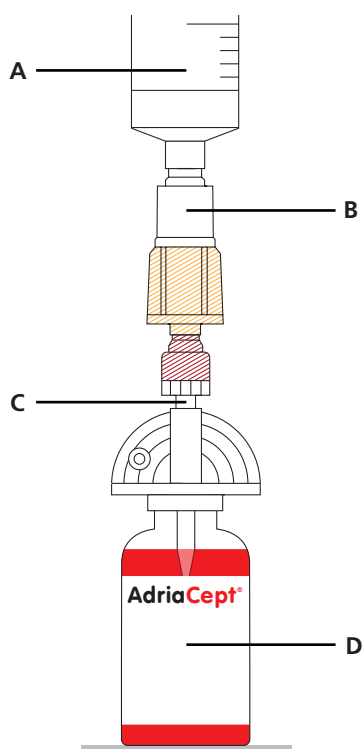


# Gebrauchsanleitung

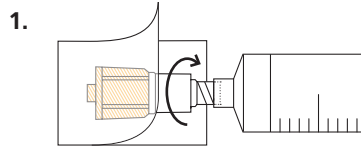


Die Verpackung des PureSite-Konnektors (B) mit Hilfe der gekennzeichneten Peellasse öffnen. Den weiblichen Luer-Lock-Anschluss (transparenter Teil) des PureSite-Konnektors (B) mit dem Luer-Lock-Anschluss der 30-ml-Spritze (A) verbinden, ohne den PureSite-Konnektor (B) aus der Verpackung zu nehmen. Eine Trennung ist anschließend nicht mehr möglich.

2. Flip-off-Kappe von der AdriaCept®-Durchstechflasche (D) entfernen und Einstichstelle desinfizieren.

3. Mini-Spike® (C) aus der sterilen Umverpackung entnehmen und Schutzkappe vom Spike entfernen. Den weiblichen Luer-Lock-Anschluss (rot) des Mini-Spikes® (C) dabei nicht berühren.

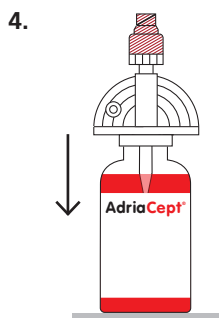


Den Spike vom Mini-Spike® (C) unter Halten der Grifffläche vollständig in die Medikamentenflasche (D) einführen. Dazu muss die Durchstechflasche auf einem festen Untergrund stehen.

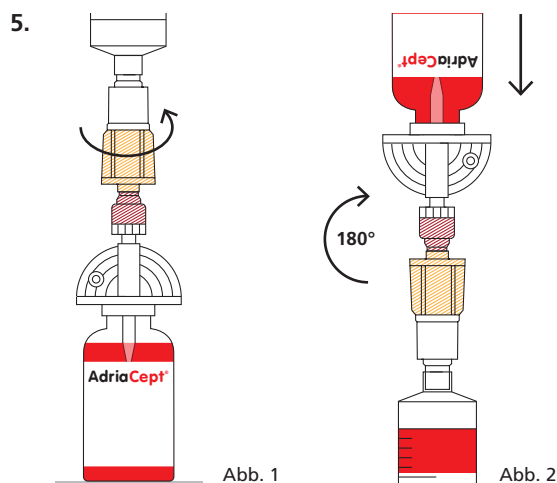

Den männlichen Luer-Lock-Anschluss des mit der Spritze verbundenen PureSite-Konnektors (B, orange) mit dem weiblichen Anschluss (rot) des Mini-Spikes® (C) der aufrechtstehenden Flasche AdriaCept® Lösung 50 mg (D) verbinden (siehe Abb. 1).

Die Durchstechflasche mit AdriaCept® Lösung 50 mg (D) senkrecht nach oben halten und die Lösung vollständig (25 ml) in die Spritze aufziehen (siehe Abb. 2).

6. Die mit AdriaCept® Lösung 50 mg befüllte Spritze (A) einschließlich des PureSite-Konnektors (B) vom Mini-Spike® (C) trennen. Der PureSite-Konnektor (D) und die angeschlossene Spritze (A) bilden ein geschlossenes System. Der PureSite-Konnektor (B) schließt automatisch und verhindert eine unbeabsichtigte Freisetzung des Arzneimittels. Das System schützt vor einer chemischen oder mikrobiellen Kontamination.

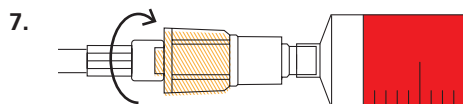

Den freien PureSite-Konnektor-Anschluss wischdesinfizieren und männlichen Luer-Lock-Anschluss (B, orange) mit dem Einmalkatheter (E) verbinden.

8. AdriaCept® Lösung 50 mg aus der Spritze über den Katheter in die Blase instillieren.
9. Den PureSite-Konnektor mit Spritze (A + B) nach der Applikation vom Katheter (E) trennen.

Soll der Katheter (E) nachgespült bzw. ein Volumen von mehr als 25 ml in die Blase instilliert werden, ist eine mit dem gewünschten Volumen an steriler 0,9 %iger Kochsalzlösung gefüllte Spritze mit dem Katheter (E) zu verbinden und die Lösung in den Katheter (E) zu injizieren.

**Nach der Instillation ist der Katheter aus der Blase zu entfernen und die Komponenten als Zytostatika-Abfall sachgerecht zu entsorgen.**

Pharmazeutisches Unternehmen:

JEmedis GmbH  
Im Biotechnologiepark 9  
14943 Luckenwalde  
Tel.: 03371 4030650



Stand der Information: Juli 2023